



This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

Maxim DL


Maxim DL is currently the main interface for controlling the observatory and cameras as well as for performing the observations.

Interface und grundlegende Bedienung


Maxim DL can be started most easily by double-clicking on the icon Maxim DL 6 on the desktop or via the taskbar.

Main window

The help, picture and the header or bottom, which shows the display information of Maxim DL, the most important buttons. The header is highlighted. The red button opens the **Observatory** while the **Panel** button contains, for example, to display the camera telescope. The green button opens the **Camera Control Panel**, which provides scaling controls for the cameras. These two windows will be discussed in detail below.

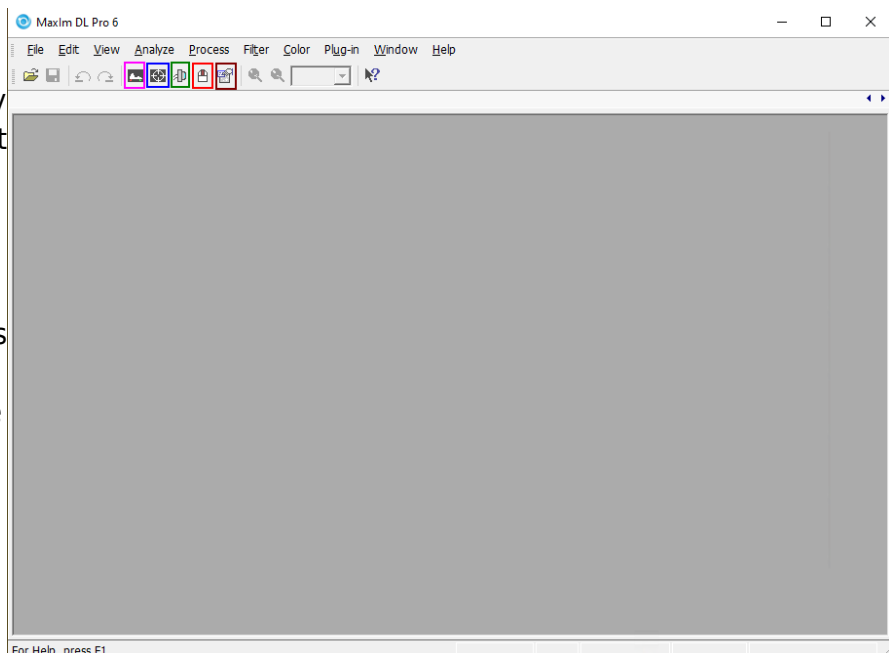

Main window of Maxim DL

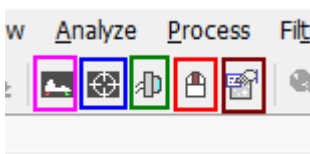


Observatory Panel


The **Observatory** control window has different tabs to control the different parts of the observatory. You can move to objects by entering their coordinates, selecting them from a catalog or marking them on an all-sky map. The dome can be opened, closed, and if necessary moved manually. Furthermore, the telescope can be moved manually via this control window and parked again after the observations are finished.

Setup Tab

The setup tab is used to establish the connection to the telescope, the dome, and the focuser. You can click on the **Connect** button behind the respective entry or on **Connect All** to establish the connection to all components simultaneously. All other entries like **Rotator** are not relevant for us.

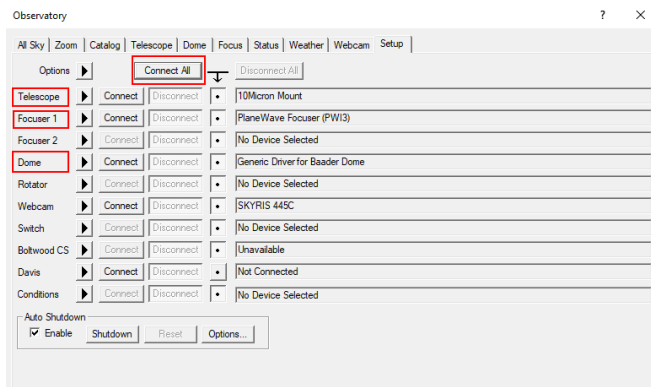

Setup-Tab - Nothing connected

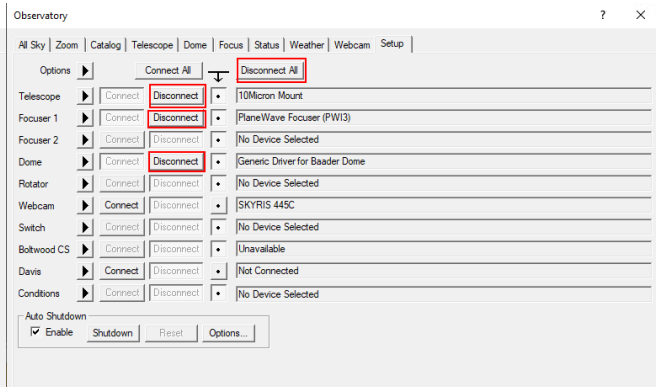


Setup-Tab - Telescope, dome, and focuser connected


In order to disconnect the devices after the observation, you can click on the individual **Disconnect** buttons or on **Disconnect All**.

Dome Tab

The **Open** and **Close** buttons can be used to open and close the dome. The dome always opens or closes completely. It must be ensured that the **Slave Dome To Scope** option is activated, otherwise the dome will not follow the telescope. Unfortunately, this option turns off every time the dome is opened, closed, or the telescope is parked.

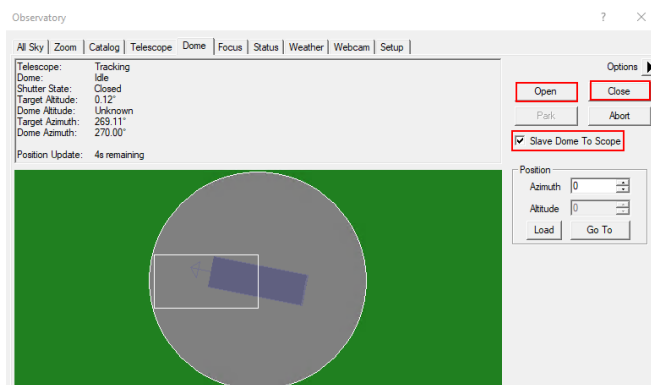

Dome closed

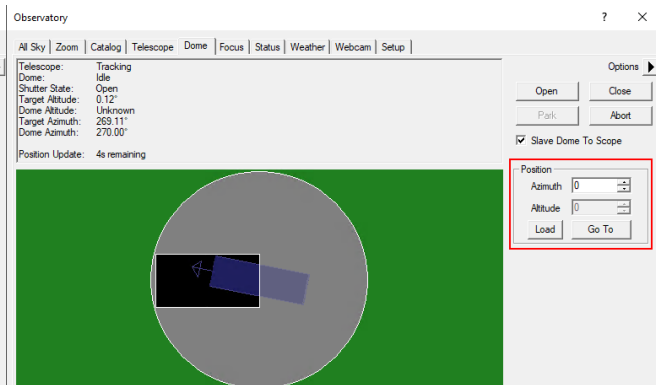

Dome open

The dome can be moved manually via the functions in the **Position** box. This is especially useful when the telescope and the slit are not correctly aligned and the dome needs to be recalibrated. On the example shown above, the alignment is not optimal but still so good that the telescope does not look at the dome.

Telescope Tab

The telescope tab shows in the upper left area where the telescope is currently looking and which action it is currently performing. The right ascension and declination are displayed for the current date as well as for the standard epoch J2000. Furthermore, the altitude above the horizon and the azimuth are displayed. In the example shown below, the telescope is tracking and apart from that is inactive.



The buttons in the **Nudge** section can be used to move the telescope manually, with the step size selected via the drop-down menus. Each movement can again be aborted via the **Abort** button.

In the **Target Coordinates** area you can enter the right ascension and declination of an object and slew to it via the **Go To** button. The **Zoom To** button switches to the Zoom tab, which displays a map of the sky at the respective coordinates.

The **Park** button in the **Mount** area can be used to park the telescope after the observation.

Catalog Tab

Using the Catalog tab, the built-in catalogs can be searched for objects. To do this, first select a category from the **Category** drop-down menu. You can choose between Stars, Deep Space and Solar System. From the drop-down menu **Object ID** either the object directly or a catalog can be selected. In the latter case the catalog number of the object, or only a part of it, can be entered (see example below). After a click on **Search** a list of possible objects is displayed. The desired object can be selected from this list. With a click on **Go To** the object is approached.

Observatory

All Sky | Zoom | Catalog | Telescope | Dome | Focus | Status | Weather | Webcam | Setup

Search ID

Object ID Search

Category

Deep Space

Object ID

NGC 381

Search

Cancel

Search Region

Criterion

Min

Max

Add

Edit

Remove

Keypad

Options

Zoom To

Sync

Go To

Abort

Search Results: found 11 objects

| ID1 | ID2 | Type | RA | Dec | Mag | Size | HA | Alt | Az | Sle... |
|---------|---------|--------------|-------------|--------------|------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| NGC381 | | Open Cluster | 01h 08m 18s | 61° 35' 00" | 9.3 | 7' | 01h 51m 17s | 72.5° | 312.8° | 77.6° |
| NGC3810 | PGC3... | Galaxy | 11h 40m 59s | 11° 28' 11" | 11.3 | 4' x 3' | 15h 18m 52s | -13.3° | 50.2° | 126.9° |
| NGC3812 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 08s | 24° 49' 19" | 13.6 | 2' x 2' | 15h 18m 42s | -1.6° | 43.9° | 122.4° |
| NGC3811 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 17s | 47° 41' 26" | 12.9 | 2' x 2' | 15h 18m 32s | 18.6° | 32.8° | 111.2° |
| NGC3813 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 18s | 36° 32' 46" | 12.3 | 2' x 1' | 15h 18m 31s | 8.8° | 38.3° | 117.1° |
| NGC3814 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 28s | 24° 48' 18" | 15.7 | 0' x 0' | 15h 18m 22s | -1.6° | 43.8° | 122.4° |
| NGC3815 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 39s | 24° 47' 59" | 14.1 | 2' x 1' | 15h 18m 10s | -1.6° | 43.8° | 122.3° |
| NGC3816 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 48s | 20° 06' 11" | 13.5 | 2' x 1' | 15h 18m 02s | -5.8° | 45.9° | 124.1° |
| NGC3817 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 53s | 10° 18' 14" | 14.2 | 1' x 1' | 15h 17m 58s | -14.5° | 50.6° | 127.0° |
| NGC3818 | PGC3... | Galaxy | 11h 41m 57s | -06° 09' 22" | 12.7 | 2' x 1' | 15h 17m 54s | -28.7° | 59.5° | 129.2° |

Zoom Tab

In the zoom tab, the sky map around the selected object is displayed. Via the option button (arrow) on the right and via the context menu, many options are accessible, such as the zoom level. If one clicks with the right mouse button on any point of the map, one can slew the telescope to this point via Slew to Mouse Position. If you click on an object, it can be selected directly. In the example below the corresponding option is Slew to 119 Tau.

Observatory

All Sky | Zoom | Catalog | Telescope | Dome | Focus | Status | Weather | Webcam | Setup

Options

Sleaved to Telescope

Moving Scope

View RA: 05h 35m 40s Mouse RA: 05h 32m 37s 119 Tau/HIP25945 (Star)

View Dec: 23° 32' 46" Mouse Dec: 18° 47' 42" RA: 05h 32m 13s

View FOV: 10" Mouse Az: 52° 57' 26" Dec: 18° 35' 33"

Rotator PA: 94" Mouse Az: 147° 36' 15" Mag: 4.3

Options

Sleaved to Telescope

Observatory

All Sky | Zoom | Catalog | Telescope | Dome | Focus | Status | Weather | Webcam | Setup

Options

Sleaved to Telescope

Moving Scope

View RA: 05h 35m 40s Mouse RA: 05h 32m 21s 119 Tau/HIP25945 (S

View Dec: 23° 32' 46" Mouse Dec: 18° 44' 04" RA: 05h 32m 13s

View FOV: 10" Mouse Az: 53° 07' 29" Dec: 18° 35' 33"

Rotator PA: 94" Mouse Az: 148° 40' 15" Mag: 4.3

Options

Sleaved to Telescope

Slew to 119 Tau

Slew to Mouse Position

Confirm Slew

Expose After Slew

Abort Slew

Find Scope Position

Sync to Mouse Position...

Move Rotator...

Sync Rotator to Solved Image

Overlay Image

Auto Overlay Solved Images

Clear Overlay Image

Zoom

Density

FOV Indicator


Show Labels

Set Label Font

Flip

All Sky Tab

The All Sky tab shows the current sky. By right-clicking, you can zoom into any area. When you do that you will be redirected to the zoom tab. The option button (arrow) on the right provides access to many setting options.

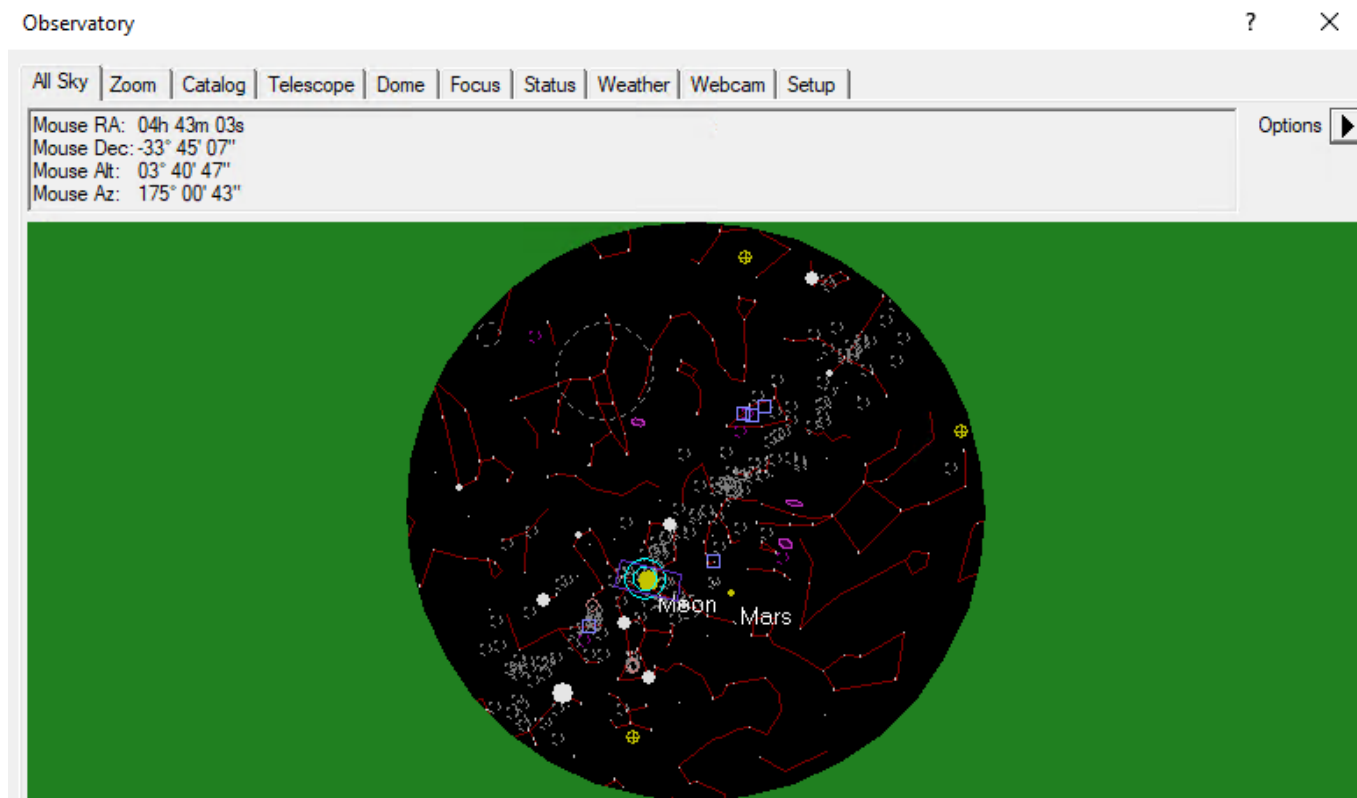


Camera Panel

The **Camera Control** window can be used to control the cameras and take the images.

Der Setup-Tab


Wie der Name schon sagt dient dieses Fenster dem Verbinden der Kameras mit Maxim DL. Dies gestaltet sich für jeden Kamerahersteller leicht unterschiedlich. Hier gehen wir auf die Vorgangsweise für QHYCCD-Kameras sowie für SBIG-Kameras ein, da diese bei uns in erster Linie eingesetzt werden. Für jedes Kameramodell muss zuerst der entsprechende Treiber ausgewählt werden. Dies muss sowohl für die eigentliche Kamera als auch für das Filterrad gemacht werden. Soll eine Guidingkamera verwendet werden muss auch diese hier verbunden werden. Normalerweise wird die Guidingkamera als **Camera 2** verbunden, während die Hauptkamera dementsprechend als **Camera 1** angebunden wird.

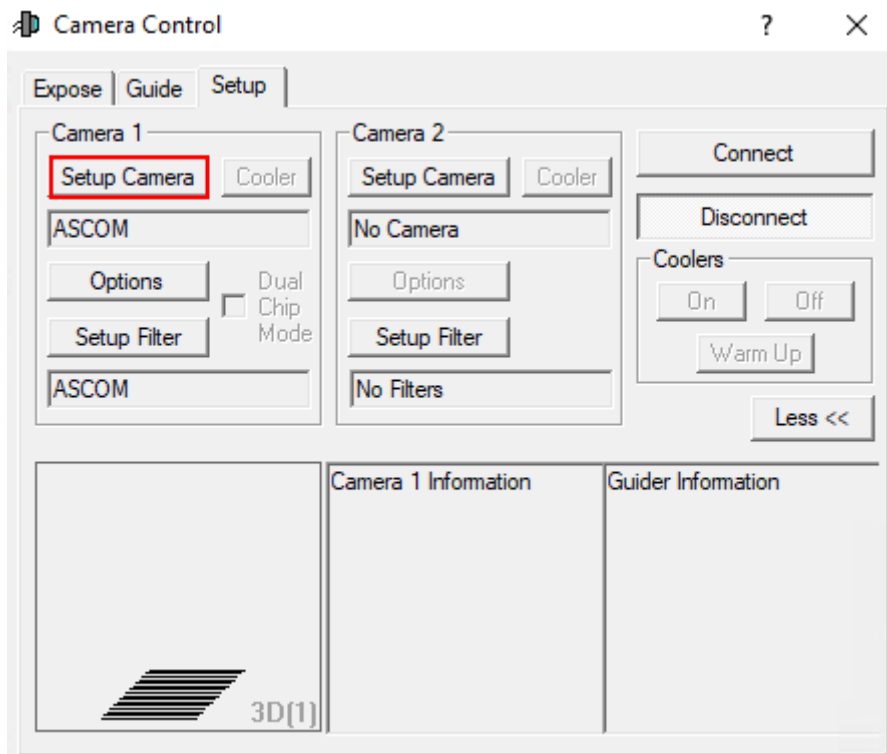

Als erstes klickt man unabhängig vom Hersteller auf **Setup Camera**.

Verbinden von QHYCCD-Kameras:

In dem sich öffnenden Fenster wählt man in dem Dropdown-Menü **Camera Model** ASCOM aus und klickt danach auf **Advanced...** (Schritt 1). Danach öffnen sich ein weiteres Fenster. In diesem wählt man wiederum über das Dropdown-Menü QHYCCD-Cameras-Capture aus und klickt anschließend auf **Properties...** (Schritt 2). Danach öffnet sich das Einstellungs Menü für den **ASCOM**-Treiber für die QHYCCD-Kameras. **ASCOM** ist die grundlegende Schnittstelle über die viele Funktionen des Observatoriums laufen.

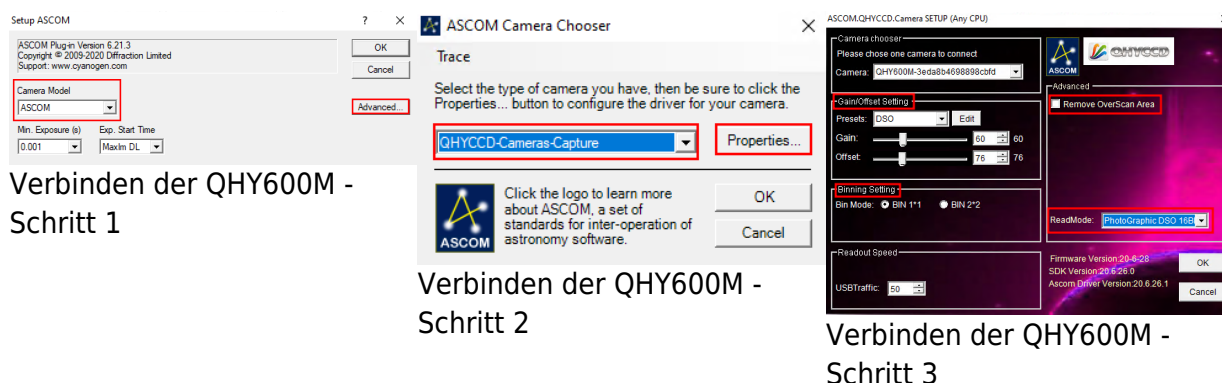

Verbinden der QHY600M -
Schritt 1



Verbinden der QHY600M -
Schritt 2

Verbinden der QHY600M -
Schritt 3


Im letzten Schritt (3) können nun alle wichtigen Einstellungen für den **ASCOM**-Treiber gemacht werden. Hierzu zählen der Auslesemodus, welcher über das Dropdown-Menü **ReadMode** ausgewählt werden kann. Zur Auswahl stehen: PhotoGraphic DSO 16bit, High Gain Mode 16bit, Extend Fullwell Mode und Extend Fullwell 2CMS. Unter **Gain/Offset Setting** kann dann der **Gain** und **Offset** eingestellt werden. Diese Einstellungen können unter **Preset** gespeichert werden bzw. gespeicherte Einstellungen auch abgerufen werden. Zusätzlich sollte für wissenschaftliche Aufnahmen auch die Option **Remove Overscan Area** aktiviert werden. Anschließend können alle drei Fenster durch Klicke auf **OK** geschlossen werden.

Verbinden von QHYCCD-Filterrädern:

Zum verbinden eines Filterrades klickt man zuerst auf **Setup Filter**.

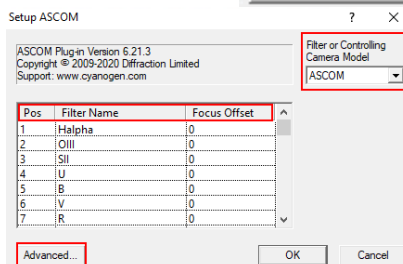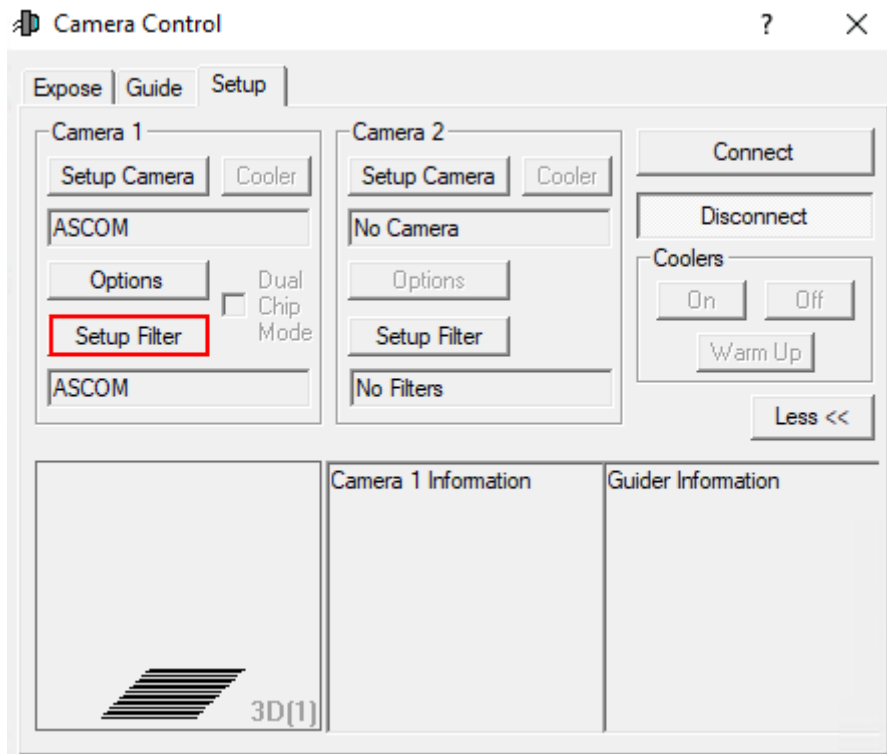


Verbinden des CFW-3-Filterrad
- Schritt 1

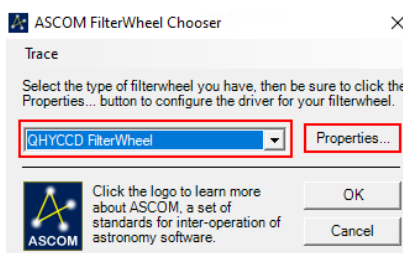

Verbinden der CFW-3-Filterrad
- Schritt 2

Im ersten Schritt muss aus dem Dropdown-Menü **Filter or Controlling Camera Model** ASCOM ausgewählt werden. Anschließend klickt man auf **Advanced...**. In dem sich öffnenden Fenster wählt man aus dem Dropdown-Menü QHYCCD FilterWheel aus und klickt danach auf **Properties...** (Schritt 2). Daraufhin öffnet sich ein weiteres Fenster, welches die möglichen

Treibereinstellungen zeigt. Die Einstellungen in diesem Fenster müssen in der Regel nur einmalig vorgenommen werden. Auszuwählen sind die **Number of Filter Slots** (in unserem Fall sind das 9) und die jeweiligen Filternamen sowie etwaige Korrekturen für den Fokus (Schritt 3). Danach müssen alle drei Fenster

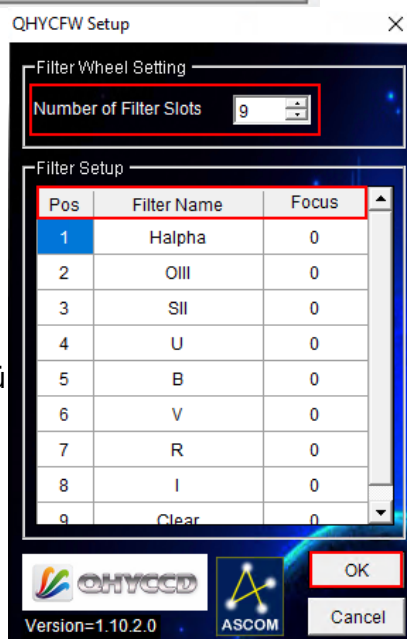

Verbinden der CFW-3-Filterrad
- Schritt 3

durch einen Klick auf **OK**
bestätigt und geschlossen
werden.

Verbinden von SBIG-Kameras:


Kommt noch...

Verbinden von SBIG-Filterrädern:

Kommt noch...

Finaler Schritt:

Nun muss noch auf **Connect** geklickt werden. Anschließend kann unter **Coolers** die Kühlung aktiviert und unter **Cooler** die Zieltemperatur eingestellt werden.

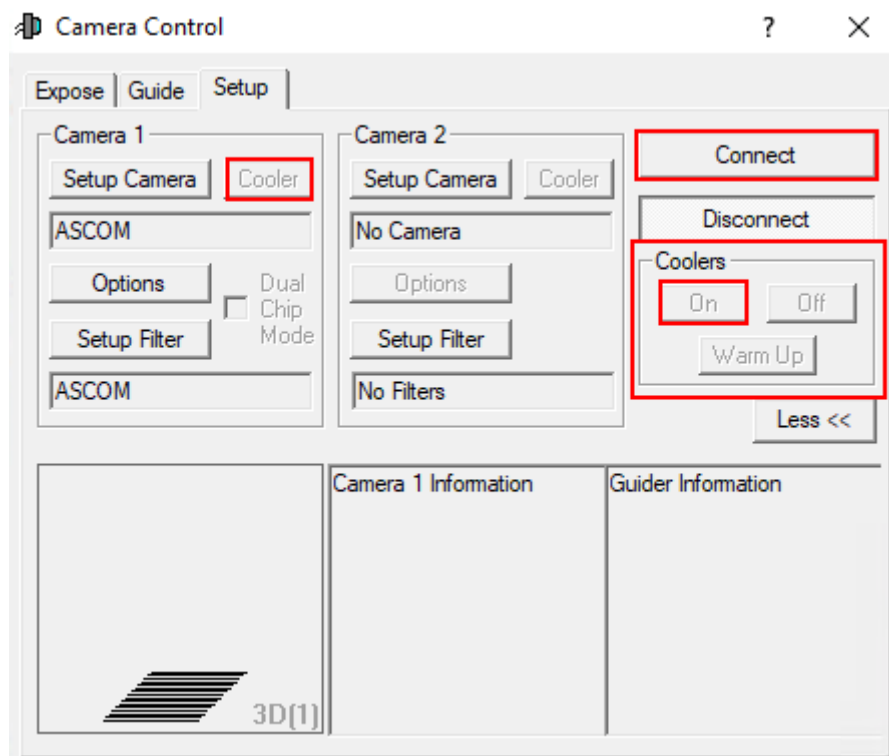


Der Expose-Tab

In diesem Tab findet man, auf kleinem Raum, die wichtigsten Einstellungen rund um die Aufnahme der Bilder. Eigene und bereits vordefinierte Einstellungssets können unter **Exposure Preset** gefunden bzw. neu angelegt werden. Die wichtigste Einstellung ist die Belichtungszeit (**Seconds**). Rechts daneben findet sich die Statusinformationszeile, welche anzeigt, was die Kamera aktuell tut. Im unteren Beispiel ist die Kamera inaktiv (Idle).


Die Filter sind unter **Filter Wheel** zu finden. Die Binning-Optionen sind wiederum über die beiden Dropdown-Menüs **X Binning** und **Y Binning** zugänglich. Des Weiteren kann der Auslesemodus (**Readout Mode**) ausgewählt werden, was z. B. für die QHY600M wichtig ist. Über die Optionen

Single, **Continuous** und **Autosave** sind als grundlegenden Modi auswählbar. Beim ersten wird nur eine einzelne Aufnahme angefertigt, wohingegen beim letzten ganze [Aufnahmeserien](#) erstellt werden können. Beim Modus **Continuous** werden hintereinander Aufnahmen mit der eingestellten Belichtungszeit erstellt und dargestellt. Dieser Modus eignet sich besonders gut zum [Fokussieren](#). In dem entsprechenden Artikel gehen wir auch genauer auf die unteren 3 Paneele ein. Weitere Optionen sind noch über **Options** (Pfeilbutton) zugänglich.

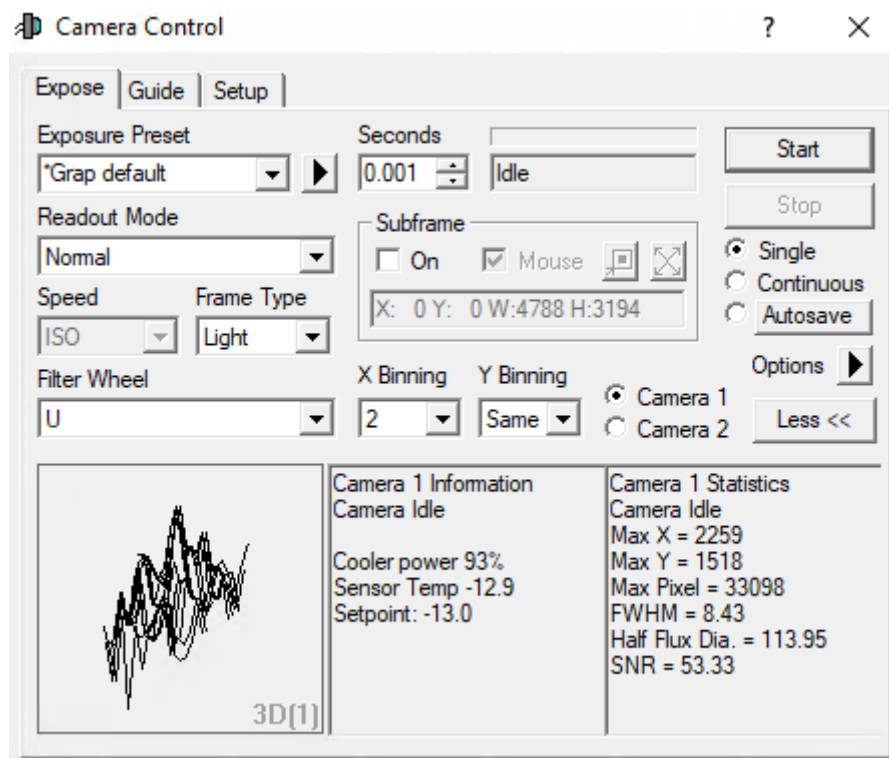


Der Guide-Tab

Der Guide-Tab wiederum hält die wichtigsten Einstellungen für das Guiding des Teleskops bereit. Auf die Details gehen wir in einer Kurzanleitung zum [Guiding](#) ein.

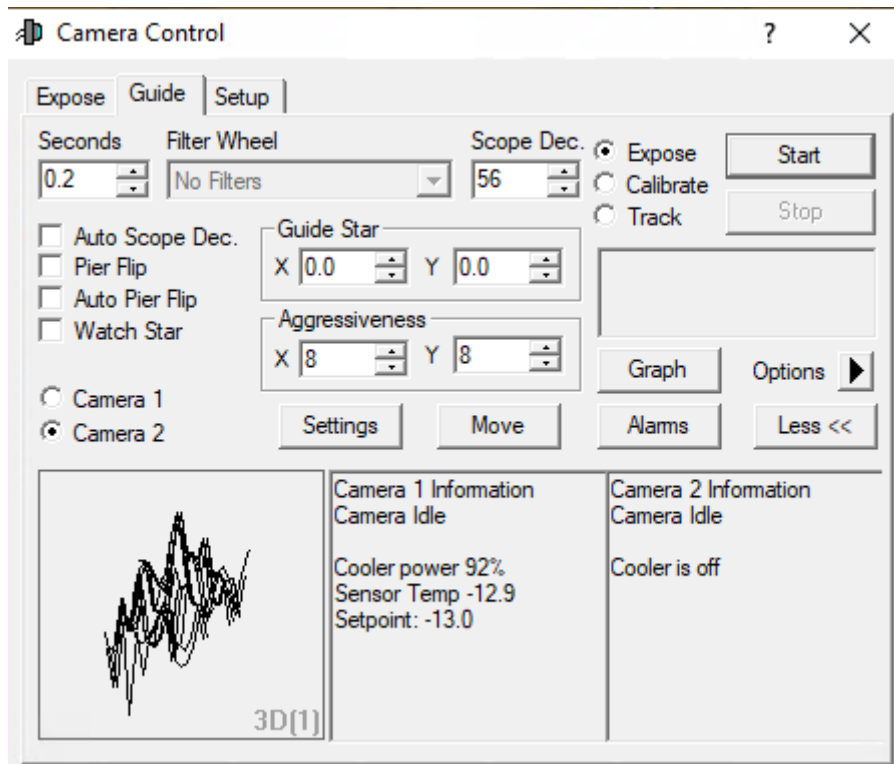

Screen Stretch Panel

Über das **Screen Stretch Panel** kann die Skalierung der Aufnahmen beeinflusst werden. Im ersten Beispiel unten, welches M42 zeigt, ist die Skalierung auf Low gestellt. Erhöht man die Skalierung auf Medium werden deutlich mehr Details von M42 sichtbar. Viele weitere hilfreiche vordefinierte Skalierungen können aus dem entsprechenden Dropdown-Menü ausgewählt werden.

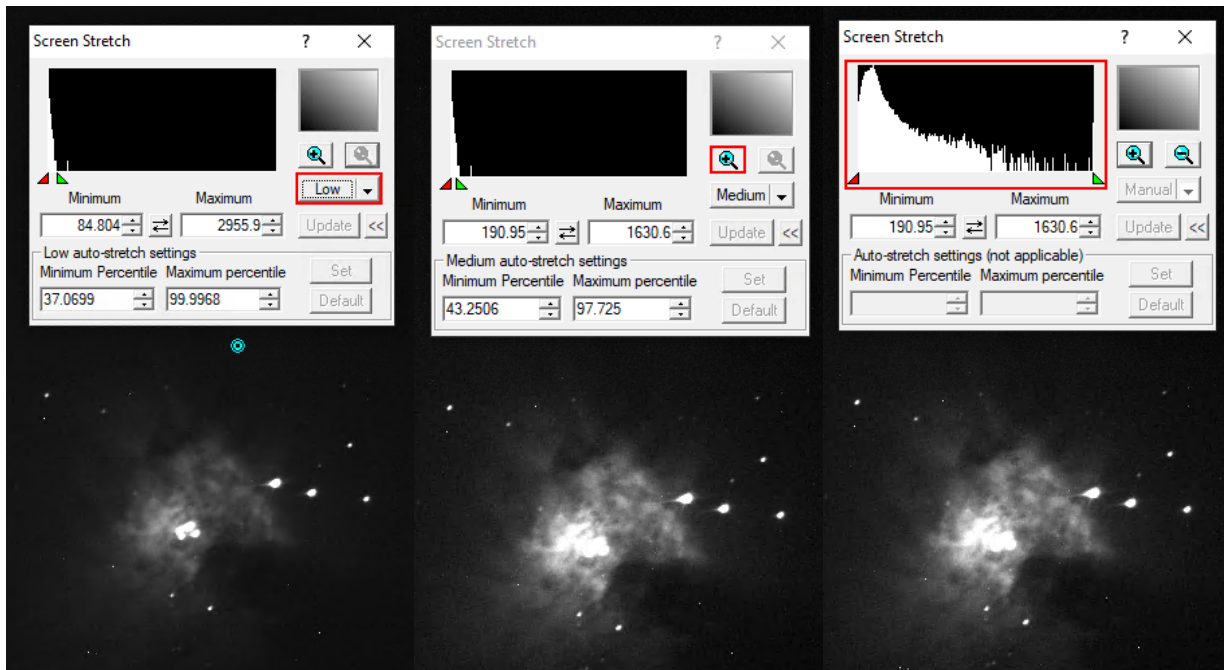

Screen Stretch - Low-Skalierung

Screen Stretch - Medium-Skalierung


Screen Stretch - Histogram-Zoom

Klickt man auf das Plus-Symbol im oberen rechten Bereich, wird in das oben links dargestellte Histogramm gezoomt. Dies ermöglicht es die Skalierung über das rote und das grüne Dreieck feiner

einzustellen, wobei das rote Dreieck den Schwarzwert und das grüne Dreieck des Weißwert definiert. Entsprechendes kann auch über die Felder **Minimum** und **Maximum** erfolgen.

Information Panel

Das **Information Panel** ist insbesondere hilfreich um zu prüfen, ob das Bild überbelichtet ist und herauszufinden an welchen Sternen dies unter Umständen liegt. Hier sind für uns insbesondere die Werte **Pixel** und **Maximum** interessant. Im Standardmodus Aperture werden die Informationen aus der auf dem Bild dargestellten türkisen Apertur ausgelesen, welche man z.B. aber auch auf einen hellen Stern schieben kann. Tut man dies sind z.B. noch das Signal-Rausch-Verhältnis (**SNR**) und die Full-Width-Half-Maximum (**FWHM**) von Interesse. Werte wie die **Magnitude** sind auf unseren zumeist unkalibrierten Bildern nicht von Relevanz.

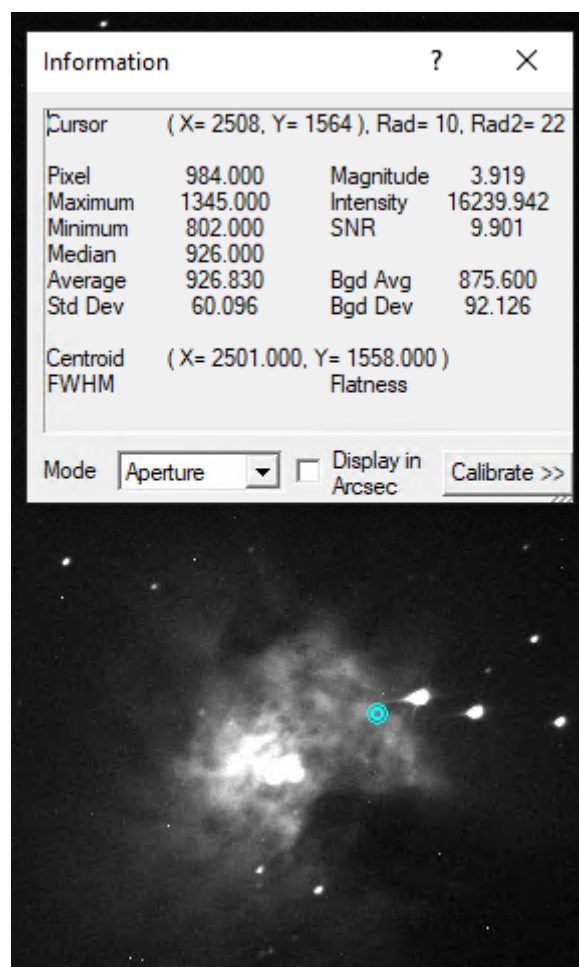

From:

<https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/> - OST Wiki

Permanent link:

<https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/doku.php?id=en:ost:ccds:maximdl&rev=1614452706>

Last update: 2021/02/27 19:05

